

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 26  
Телефон: +7 (843) 570-68-80

Электронная почта: [mail@rocadamed.ru](mailto:mail@rocadamed.ru)  
Сайт: <https://rocadamed.ru>

### Оптовый департамент

г. Казань, ул. Проспект Победы, 204В, оф.238, +7 (843) 570-60-70 (внутр.9200), [opt@rocadamed.ru](mailto:opt@rocadamed.ru)

**Казань** ул. Проспект Победы, 204В, оф.413, +7 (843) 570-60-70 (внутр.9100), [mail@rocadamed.ru](mailto:mail@rocadamed.ru)

**Чебоксары** ул. Тукташа 7/8, +7 (835) 275-59-80, +7 (919) 972-49-80, [mail@med3.rocadamed.ru](mailto:mail@med3.rocadamed.ru)

**Ульяновск** ул.Орлова, 22, +7 (8422) 22-61-61, +7 (987) 630-01-61, [mail@med4.rocadamed.ru](mailto:mail@med4.rocadamed.ru)

**Н.Челны** Проспект Набережночелнинский, д. 88, оф. 204, +7 (855) 253-41-53, [mail@med6.rocadamed.ru](mailto:mail@med6.rocadamed.ru)

**Уфа** ул.Комсомольская, 148, +7 (347) 295-65-55, [ufa@rocadamed.ru](mailto:ufa@rocadamed.ru)

**Самара** ул. Московское шоссе 55, 4 этаж, офис. 406, 407, 402, +7 (846) 374-28-08, [samara@rocadamed.ru](mailto:samara@rocadamed.ru)

**Пенза** ул.Пушкина, д.15, офис 16, 8 (8412) 22-27-27 или 8 (987) 516-27-27, [penza@rocadamed.ru](mailto:penza@rocadamed.ru)

**Рязань** ул. Есенина, д.36 Б офис 314, 8-4912-40-70-88, [ryazan@rocadamed.ru](mailto:ryazan@rocadamed.ru)

**Саратов** просп. Строителей, 1, корп. 3А (офис 7, этаж 3), +7 (8452) 44-88-12, [d.bolshunov@rocadamed.ru](mailto:d.bolshunov@rocadamed.ru)

**Тольятти** ул. Дзержинского 90А, оф.34, 33, (8482) 69-39-69, [tolyatti@rocadamed.ru](mailto:tolyatti@rocadamed.ru)

**Стерлитамак** ул. Худайбердина 58, офис 35, +7 (986) 700-85-65, [sterlitamak@rocadamed.ru](mailto:sterlitamak@rocadamed.ru)

**Калуга** ул. Труда, д. 15, +7 (915) 890-11-85, [kaluga@rocadamed.ru](mailto:kaluga@rocadamed.ru)

**Оренбург** ул. Аксакова 19, оф 5, 83532-91-70-70, [g.atshibaeva@rocadamed.ru](mailto:g.atshibaeva@rocadamed.ru)

**Ижевск** ул. Пушкинская, 270 офис 503, +7 (341) 265-19-90, [izhevsk@rocadamed.ru](mailto:izhevsk@rocadamed.ru)

**Ярославль** ул. Победы, д.14а, оф.809, +7 (485) 233-15-25, [yaroslavl@rocadamed.ru](mailto:yaroslavl@rocadamed.ru)

**Пермь** ул. Фонтанная, 16, офис 107, +7 (342) 256-10-21

**Москва ЮГ** ул.Ленинская Слобода, д.19, 4 этаж, часть комнаты 21ж-3, 8 (495) 228-83-77, [m.ivanov@rocadamed.ru](mailto:m.ivanov@rocadamed.ru)

**Москва Запад** ул. Бутлерова, д. 17, БЦ "Нео Гео", блок В, офис 5148, 8 (495) 22-88-177, [a.demler@rocadamed.ru](mailto:a.demler@rocadamed.ru)

### ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

8-800-250-77-80

[www.shop.rocadamed.ru](http://www.shop.rocadamed.ru)



# BAOT®





Интерактивный сервис «ROCADA BOX» обеспечивает наших партнеров широчайшим выбором сертифицированных стоматологических товаров с доставкой до двери в 11 часовых поясах России.



 **ROCADA BOX**

### Наши преимущества:



#### Качественные материалы

Работаем в соответствии с законодательством РФ. Все товары с разрешительными документами - отправляем их вам на эл.почту.



#### Доставка по всей России

В 21 регион нашей страны доставка осуществляется бесплатно. Отаружаем товар в течении 24ч с момента поступления оплаты.



#### Более 60 000 товаров

Прямые поставки от производителей гарантируют наличие большого ассортимента на складе и самые выгодные цены на рынке.



#### Соблюдение условий хранения

Гарантируем сохранность товара до получения его вами тщательным соблюдением условий хранения и транспортировки.



#### Свой сервисный центр

Свой сертифицированный сервис - консультируем, ремонтируем с выездом и подбираем запчасти. Наличие подменного фонда.



#### Выгодные условия покупки

Все, что нужно для оснащения вашей клиники, можно оформить с оплатой онлайн или моментальным скачиванием счета.

ВАОТ – КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КИТАЕ.  
ОСНОВАН ГРУППОЙ УЧЁНЫХ В 1994 Г.  
СЕГОДНЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ОБРЕТАЕТ  
ПОПУЛЯРНОСТЬ В ЕВРОПЕ И США



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мелкодисперсная масса по доступной цене
- Идеальна для дорогих премиальных работ
- Очень послушна в процессе реставрации
- Богатая линейка Эффект Масс
- Большой ассортимент Красителей
- Высоко эстетичные результаты
- Бесперебойные поставки, всегда в наличии
- Устойчивость к изменению цвета  
(в частности позеленению, при использовании никель-хромовых сплавов и отсутствие метаметрии)
- Биосовместимость  
(результаты испытаний показывают, что продукты ВАОТ безвредны для человека и обладают хорошей биосовместимостью)

Физико-химические свойства массы





# ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАССЫ




- Мелкодисперсная масса (это присуще только дорогим сегментам керамики)
- Самая прочная на изгиб масса среди аналогов (108-116 МПа)
- Низкие риски растрескивания при контурной обработке благодаря такой прочности
- Однородная структура и равномерное распределение непрозрачных частиц
- Теплые оттенки, соответствующие расцветке Vita Classic

Химический состав



## В химический состав ВАОТ входят:

оксид кремния      оксид циркония  
 оксид алюминия    оксид кальция  
 оксид калия        оксид бора  
 оксид натрия

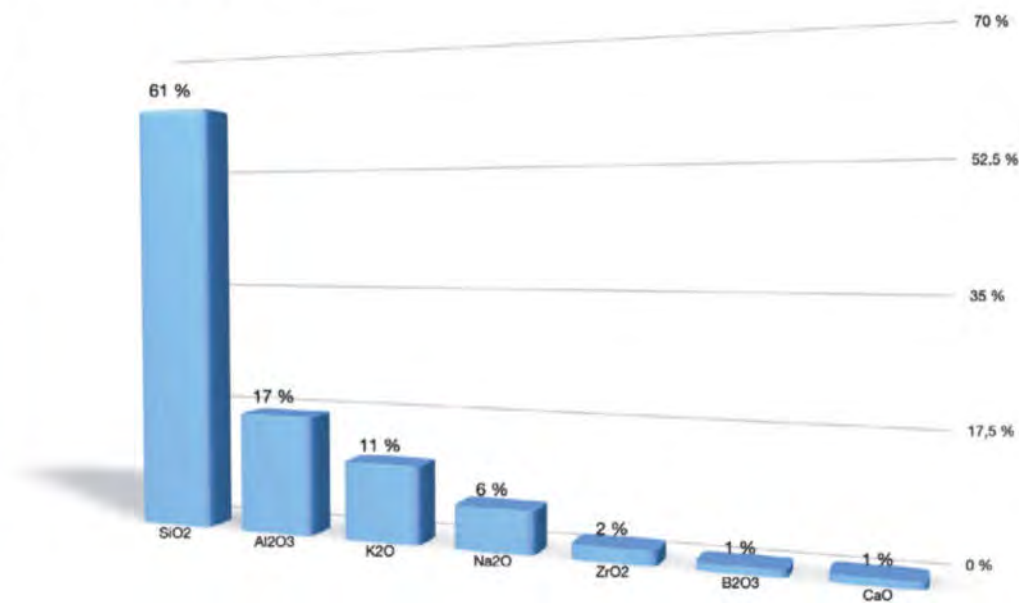

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАССЫ ВАОТ

	PFM-JC	PFZ-ZCG	Стандарт по ISO
КТР (10-6-K-1)	12.9-13.8	8.9-9.6	—
Стеклование (°C)	575	590	—
Прочность на изгиб (МПа)	118	106	>50
Сила сцепления (МПа)	39.5	34	>25
Химическая растворимость (мкг/см <sup>2</sup> )	31.8	20	≤100

# КАТЕГОРИИ

зуботехнических масс



**BOAT**<sup>®</sup>

BOAT Biological Technology Co., Ltd

## ОПАК ПРОМЫВНОЙ

Wash Opaque, 50 гр. / 7 гр.



Порошковый 50 гр.

Пастообразный 7 гр.

## ОПАК

Opaque JC, 50 гр. / 5 гр.



Порошковый 50 гр.

Пастообразный 5 гр.

Количество  
оттенков:  
**16**

## ОПАК БЛИЧ

Opaque Bleach, 5 гр.



Пастообразный 5 гр.

Количество  
оттенков:  
**2**



## ПЛЕЧЕВАЯ МАССА

Margin, 15 гр.



Количество  
оттенков:  
**4**

## ДЕНТИН

Dentin, 50 гр. / 15 гр.



Количество  
оттенков:  
**16**

Металлокерамика

Циркон

## ПРИШЕЕЧНАЯ МАССА

Cervical, 15 гр.



Металлокерамика

Циркон

## ДЕНТИН БЛИЧ

Dentin BL, 50 гр. / 15 гр.



Металлокерамика

Циркон

## ОПАК ДЕНТИН

Opaque Dentin, 50 гр. / 15 гр.



Количество  
оттенков:  
**16**

## ЭМАЛЬ

Enamel, 50 гр. / 15 гр.



Металлокерамика

Циркон



Металлокерамика

## ТРАНСПАРЕНТ

Transparent, 50 гр. / 15 гр.



Циркон



Металлокерамика

Циркон

## ГЛАЗУРЬ

Glaze, 15 гр.

## ЭФФЕКТ-МАССЫ

Effect (опаловые), 15 гр.



Металлокерамика



Циркон

## КРАСИТЕЛИ

Stain, 3 гр.



Металлокерамика

Циркон

## ДЕСНЕВАЯ МАССА

Gingiva, 15 гр.



Металлокерамика



Циркон

## ЖИДКОСТИ

Liquids



Жидкость для опала 50 мл.

Жидкость моделировочная 240 мл.

Жидкость для глазури и красителей 50 мл.



## НАЗНАЧЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

Жидкость  
для опак  
50 мл.



Опак промывной

Опак порошок

Жидкость  
моделировочная  
240 мл.



Опак дентин

Дентин

Эмаль

Транспарент

Пришеечная масса

Плечевая масса

Десневая масса

Жидкость для  
глазури и  
красителей  
50 мл.



Краситель

Глазурь

## ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СПЛАВАМ И КАРКАСАМ



КТР ВАОТ PFM — 13.8\*10

Поэтому, для ВАОТ подходят  
сплавы с КТР 14,0 - 14,3

- Используйте миниатюрные каркасы и наносите более толстые слои
- Обработку металлических каркасов делайте исключительно твердосплавными фрезами и камнями
- Не обрабатывайте каркасы гальваническими алмазными фрезами во избежание трещин и пузырей в будущем
- «Расчесывайте» каркас в одном направлении
- Наносите не на отпесоченный каркас, а на ровную оксидную пленку\*
- Использование бондинга или моющего опакера **ОБЯЗАТЕЛЬНО**

\*оксидная пленка должна быть ровной, однотонной и без пятен, в противном случае рекомендуем повторную пескоструйную обработку и дегазацию.

## ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Первый слой цветового опака должен быть тонким, а второй слой можно наносить толще
- Обязательно конденсируйте при нанесении
- Наносите более толстые слои, т.к. масса ВАОТ любит толстые слои на миниатюрных каркасах
- При изготовлении мостов, на каждом обжиге (даже на глазури) обязательно делайте сепарацию до опакового слоя
- Для фрезерованных каркасов увеличивайте время охлаждения вдвое



## ПАРАМЕТРЫ ОБЖИГА для печей «Аверон»




	Девазация		Бондинг		Моющий опакер		Паста опакер	
П-Сушка	500°	0м	450°	3м	500°	3м	500°	3м
Сушка	100 %	1м	100 %	2м	100 %	2м	100 %	3м
Сушка	500°	0м	500°	2м	500°	3м	600°	4м
П-Нагрев	500°	60%м	500°	60%м	500°	50%м	600°	50%м
П-Нагрев		0:00		0:00		1:00		1:00
Нагрев	1030°	МАХ%м	1000°	65%м	980°	50%м	960°	50%м
Обжиг		10:00		1:30		1:00		1:30
Охлаждение	1000°	0м	980°	1м	650°	4м	650°	4м
Закалка		0м		0м		0м		0м
Открыв	1000°	0м	980°	2м	650°	1м	650°	1м
Вакуум	500°	1029°	500°	980°	600°	980°	600°	960°

	Дентин 1-2		Коррекция 1		Коррекция 2		Глазурь и красители	
П-Сушка	500°	2м	500°	2м	500°	2м	500°	2м
Сушка	100 %	3м	100 %	3м	100 %	3м	100 %	3м
Сушка	550°	3м	550°	3м	550°	3м	550°	2м
П-Нагрев	550°	50%м	550°	50%м	550°	50%м	550°	50%м
П-Нагрев		1:00		1:00		1:00		1:00
Нагрев	890°	50%м	880°	50%м	875°	50%м	870°	50%м
Обжиг		1:30		1:30		1:30		1:30
Охлаждение	880°	2м	880°	2м	875°	2м	870°	2м
Закалка		0м		0м		0м		0м
Открыв	650°	1м	650°	1м	650°	1м	650°	1м
Вакуум	550°	889°	550°	879°	550°	874°	---	---



# ПАРАМЕТРЫ ОБЖИГА для печей «Programat»

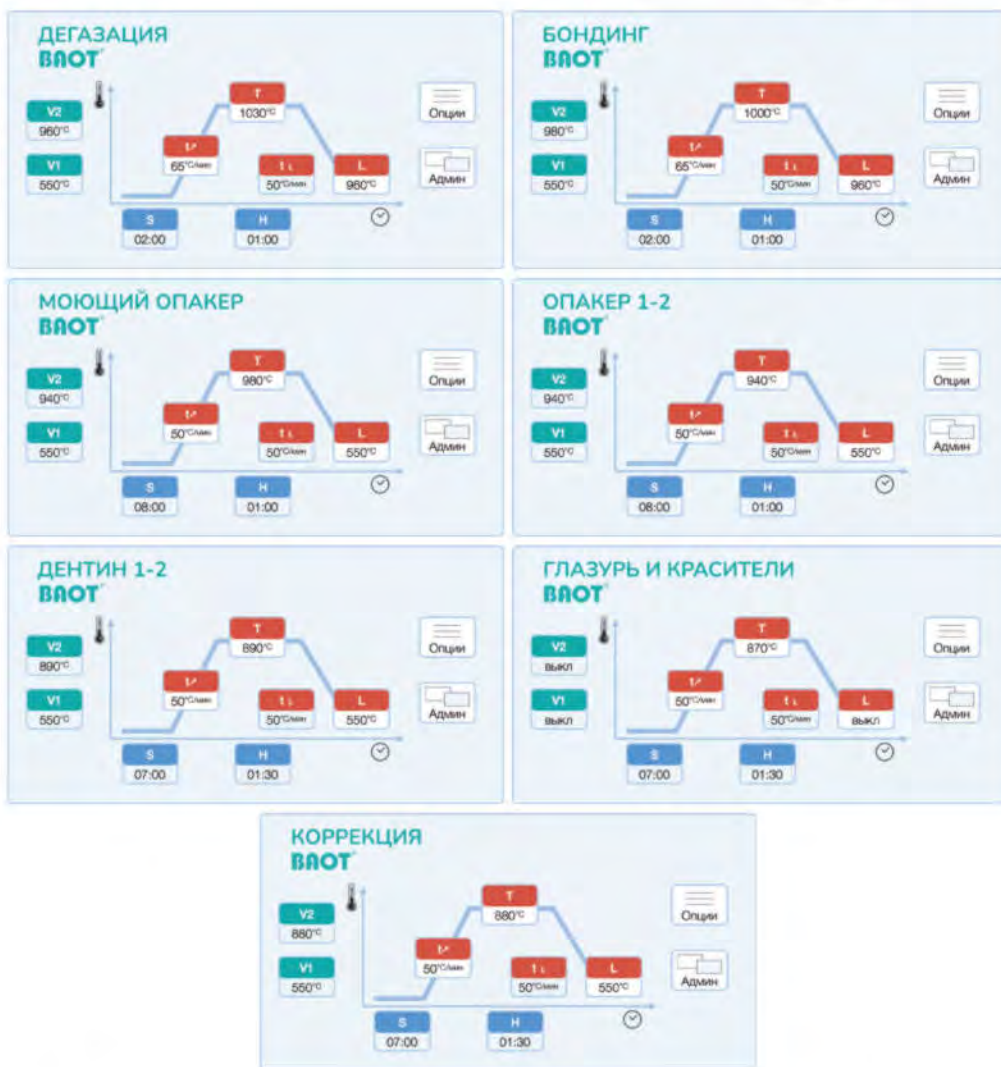

# Параметры обжига для циркониевой керамики VLOT


	Моющий опакер	Дентин 1-2	Коррекция	Глазурь и краситель
Температура сушки, °C	500°C	500°C	500°C	500°C
Время сушки, мин	2	3	2	2
Время нагрева, мин.	2	3	2	2
Скорость нагрева	50	50	50	50
Температура обжига, °C	960°C	920°C	910°C	890°C
Время выдержки, мин	1	1	1	1
Время охлаждения	4	4	4	4
Темп. Охлаждения	550°C	550°C	550°C	550°C
Вакуум ВКЛ, °C	500°C	500°C	500°C	-
Вакуум ВЫКЛ, °C	960°C	920°C	910°C	-




Указанные параметры незначительно отличаются от рекомендаций производителя, но выведены нашими специалистами опытным путем в течение нескольких лет



# ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА

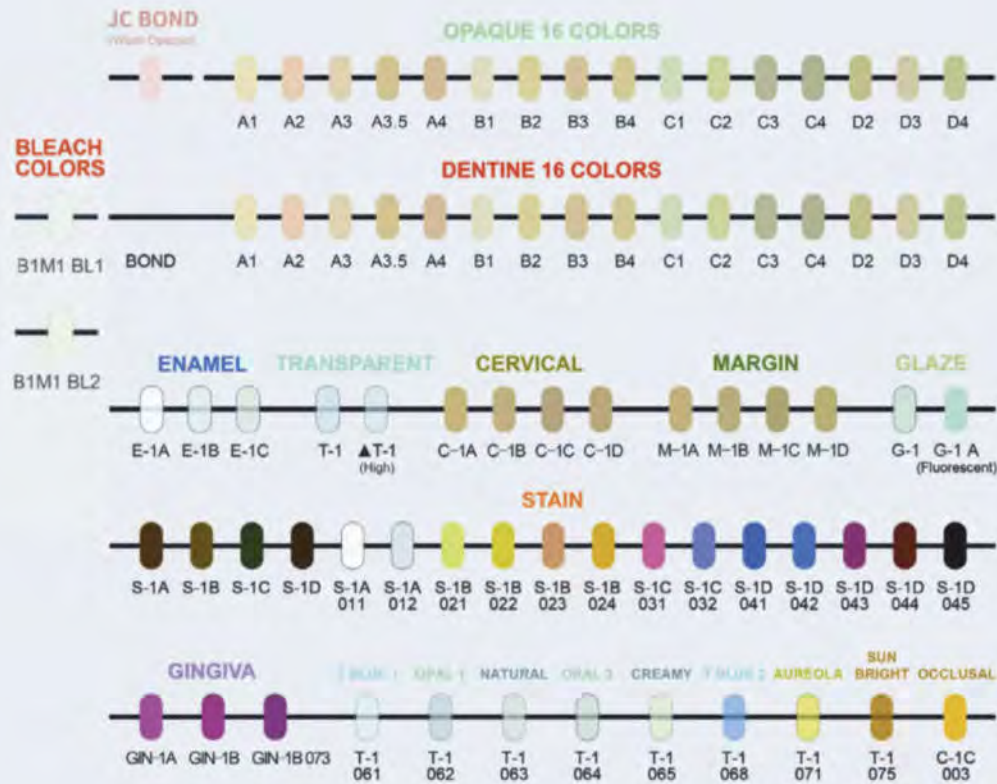

# СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ

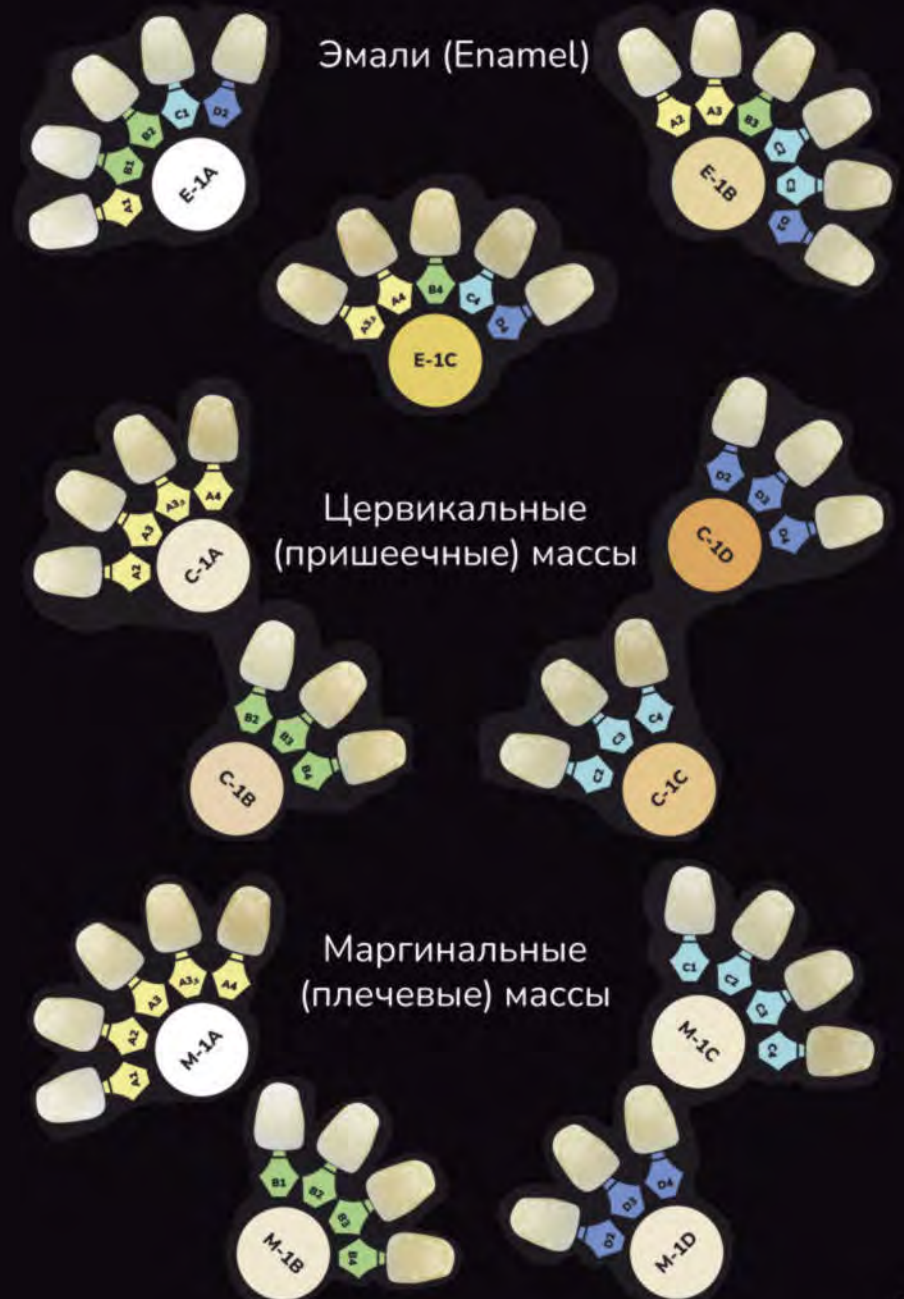

# СТАНДАРТНАЯ ШКАЛА ОТТЕНКОВ ЦВЕТОВ VITA





# ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-КУРС



## ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

- Узнаете, как **снизить себестоимость** ваших реставраций
- Ознакомитесь с **физико-химическими и механическими свойствами** массы ВАОТ
- Откроете для себя **секреты работы** с массой
- В процессе курса, создадите **высокоэстетичную реставрацию** зуба, близкую к природному
- На собственном опыте убедитесь в **высоком качестве** зуботехнических материалов ВАОТ

## КАК ЗАПИСАТЬСЯ?

Записаться можно по телефону:

8 987 281 75 74

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 26  
masi@rocadamed.ru



или по указанному QR-коду

## БЕСПЛАТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОБНИКОВ

В рамках курса предоставляем бесплатно комплект пробников стоимостью 4600 рублей, чтобы вы могли поработать с массой вместе с нашим демонстратором в течение курса.



ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ  
С НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР КОМАНДОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

## МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

### ОПАК ПРОМЫВНОЙ WASH OPAQUE

название	артикул
пастообразный 7 г	ОПР01
порошкообразный 50 г	ОПР02

### ЭМАЛЬ

название	артикул		группа оттенков
	15 г	50 г	
E-1A Enamel	ЭМ1501	ЭМ5001	A1, B1, B2, C1, D2, Bleach 1, 2
E-1B Enamel	ЭМ1502	ЭМ5002	A2, A3, B3, C2, C3, D3
E-1C Enamel	ЭМ1503	ЭМ5003	A3.5, A4, B4, C4, D4

### ТРАНСПАРЕНТ

название	артикул	
	15 г	50 г
T-1 high Transparent	T1501	T5001
T-1 medium Transparent	T1502	T5002

### ГЛАЗУРЬ

наименование	артикул
Glaze 15 г	Г15153

### КРАСИТЕЛИ

цвет	артикул
S-1A 011 Stain белый 3 г	K301 
S-1A 012 Stain прозрачно-белый 3 г	K302 
S-1A Stain красно-коричневый 3 г	K303 
S-1B 021 Stain ярко-желтый 3 г	K304 
S-1B 022 Stain желтый 3 г	K305 
S-1B 023 Stain шампайн 3 г	K306 
S-1B 024 Stain оранжевый 3 г	K307 
S-1B Stain красно-желтый 3 г	K308 
S-1C 031 Stain розовый 3 г	K309 
S-1C 032 Stain серый 3 г	K310 
S-1C Stain серый 3 г	K311 
S-1D 041 Stain ярко-синий 3 г	K312 
S-1D 042 Stain синий 3 г	K313 
S-1D 043 Stain красный 3 г	K314 
S-1D 044 Stain темно-коричневый 3 г	K315 
S-1D 045 Stain черный 3 г	K316 
S-1D Stain красно-серый 3 г	K317 



**ОПАК**

оттенок	артикул		
	5 г пастообразный	15 г порошковый	50 г порошковый
A1	ОПАС502	ОПОР1503	ОПОР5001
A2	ОПАС503	ОПОР1504	ОПОР5002
A3	ОПАС504	ОПОР1505	ОПОР5003
A3.5	ОПАС505	ОПОР1506	ОПОР5004
A4	ОПАС506	ОПОР1507	ОПОР5005
B1	ОПАС507	ОПОР1508	ОПОР5006
B2	ОПАС508	ОПОР1509	ОПОР5007
B3	ОПАС509	ОПОР1510	ОПОР5008
B4	ОПАС510	ОПОР1511	ОПОР5009
C1	ОПАС511	ОПОР1512	ОПОР5010
C2	ОПАС512	ОПОР1513	ОПОР5011
C3	ОПАС513	ОПОР1514	ОПОР5012
C4	ОПАС514	ОПОР1515	ОПОР5013
D2	ОПАС515	ОПОР1516	ОПОР5014
D3	ОПАС516	ОПОР1517	ОПОР5015
D4	ОПАС517	ОПОР1518	ОПОР5016
Bleach B1M1 BL1	ОПАС518		
Bleach B1M1 BL2	ОПАС519		

**ОПАК ДЕНТИН**

оттенок	артикул	
	15 г	50 г
A1	ОД15088	ОД50104
A2	ОД15089	ОД50105
A3	ОД15090	ОД50106
A3.5	ОД15091	ОД50107
A4	ОД15092	ОД50108
B1	ОД15093	ОД50109
B2	ОД15094	ОД50110
B3	ОД15095	ОД50111
B4	ОД15096	ОД50112
C1	ОД15097	ОД50113
C2	ОД15098	ОД50114
C3	ОД15099	ОД50115
C4	ОД15100	ОД50116
D2	ОД15101	ОД50117
D3	ОД15102	ОД50118
D4	ОД15103	ОД50119

## ДЕНТИН

оттенок	артикул	
	15 г	50 г
A1	Д15052	Д50070
A2	Д15053	Д50071
A3	Д15054	Д50072
A3.5	Д15055	Д50073
A4	Д15056	Д50074
B1	Д15057	Д50075
B2	Д15058	Д50076
B3	Д15059	Д50077
B4	Д15060	Д50078
C1	Д15061	Д50079
C2	Д15062	Д50080
C3	Д15063	Д50081
C4	Д15064	Д50082
D2	Д15065	Д50083
D3	Д15066	Д50084
D4	Д15067	Д50085
Bleach B1M1 BL1	ДБ15068	ДБ50086
Bleach B1M1 BL2	ДБ15069	ДБ50087

## ДЕСНЕВАЯ МАССА

название	артикул
Gin-1B 073 Gingiva Dark-темная 15 г	ДМ1501
Gin-1B 074 Gingiva розовая 15 г	ДМ1502
Gin-1B 076 Gingiva оранж.-крас. 15 г	ДМ1503
Gin-1B 077 Gingiva свет. оранж.-кр. 15 г	ДМ1504
Gin-1B Gingiva Dark-темная 15 г	ДМ1505
Gin-1A Gingiva Light-светлая 15 г	ДМ1506

## ПРИШЕЕЧНАЯ МАССА

название	артикул
Cervical C-1A красно-коричневый 15 г	ПШ1501
Cervical C-1B красно-желтый 15 г	ПШ1502
Cervical C-1C серый 15 г	ПШ1503
Cervical C-1D красно-серый 15 г	ПШ1504

## ПЛЕЧЕВАЯ МАССА

название	артикул
M-1A Margin красно-коричневый 15 г	ПМ1501
M-1B Margin красно-желтый 15 г	ПМ1502
M-1C Margin серый 15 г	ПМ1503
M-1D Margin красно-серый 15 г	ПМ1504



## ЭФФЕКТ-МАССЫ

название	артикул
Окклюзионный Дентин Effect C-1C 003 Cervical 15 г	ЭФ1501
Транспарент Т-1 (Effect 061) 15 г	ЭФ1502
Транспарент Т-1 (Effect 062) 15 г	ЭФ1503
Транспарент Т-1 (Effect 063) 15 г	ЭФ1504
Транспарент Т-1 (Effect 064) 15 г	ЭФ1505
Транспарент Т-1 (Effect 065) 15 г	ЭФ1506
Транспарент Т-1 (Effect 068) 15 г	ЭФ1507
Транспарент Т-1 (Effect 071) 15 г	ЭФ1508
Транспарент Т-1 (Effect 075) 15 г	ЭФ1509

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

название	артикул
Губка (Спонж)	PM001
Кисточка	PM002

## ЖИДКОСТИ

название	мл	артикул
Жидкость для глазури и красителей Glaze and Stain Liquid	50	Ж001
Жидкость для опака Opaque Liquid	50	Ж002
Жидкость моделировочная Modeling Liquid	240	Ж003

## ЦИРКОН

### ТРАНСПАРЕНТ

название	артикул
T-2 High Transparent 15г	ЦТ1501
T-2 Medium Transparent 15г	ЦТ1502

### ГЛАЗУРЬ

название	артикул
G-2 Glaze ZCG 15 г	ЦГ1501

### ДЕСНЕВАЯ МАССА

название	артикул
Gin 2A Gingiva ZCG 15 г	ЦДМ1501
Gin 2B 273 Gingiva ZCG 15 г	ЦДМ1502
Gin 2B Gingiva ZCG 15 г	ЦДМ1503

### ЭМАЛЬ

название	артикул	
	15 г	50 г
E-2A Enamel ZCG Light-Светлая	ЦЭМ1501	ЦЭМ5001
E-2B Enamel ZCG Medium-Сред.	ЦЭМ1502	ЦЭМ5002
E-2C Enamel ZCG Dark-Темная	ЦЭМ1503	ЦЭМ5003

## ДЕНТИН

оттенок	артикул	
	15 г	50 г
A1	ЦД1501	ЦД5001
A2	ЦД1502	ЦД5002
A3	ЦД1503	ЦД5003
A3.5	ЦД1504	ЦД5004
A4	ЦД1505	ЦД5005
B1	ЦД1506	ЦД5006
B2	ЦД1507	ЦД5007
B3	ЦД1508	ЦД5008
B4	ЦД1509	ЦД5009
C1	ЦД1510	ЦД5010
C2	ЦД1511	ЦД5011
C3	ЦД1512	ЦД5012
C4	ЦД1513	ЦД5013
D2	ЦД1514	ЦД5014
D3	ЦД1515	ЦД5015
D4	ЦД1516	ЦД5016
Bleach B1M1 BL1	ЦДБ1501	
Bleach B1M1 BL2	ЦДБ1502	

## КРАСИТЕЛИ

цвет	артикул	
S-2A 211 Stain ZCG белый 3 гр	ЦК301	
S-2A 212 Stain ZCG прозрачно-бел. 3 гр	ЦК302	
S-2A Stain ZCG красно-коричневый 3 гр	ЦК303	
S-2B 221 Stain ZCG ярко-желтый 3 гр	ЦК304	
S-2B 222 Stain ZCG желтый 3 гр	ЦК305	
S-2B 223 Stain ZCG шампайн 3 гр	ЦК306	
S-2B 224 Stain ZCG оранжевый 3 гр	ЦК307	
S-2B Stain ZCG красно-желтый 3 гр	ЦК308	
S-2C 231 Stain ZCG розовый 3 гр	ЦК309	
S-2C 232 Stain ZCG серый 3 гр	ЦК310	
S-2C Stain ZCG серый 3 гр	ЦК311	
S-2D 241 Stain ZCG ярко-синий 3 гр	ЦК312	
S-2D 242 Stain ZCG синий 3 гр	ЦК313	
S-2D 243 Stain ZCG красный 3 гр	ЦК314	
S-2D 244 Stain ZCG темно-корич. 3 гр	ЦК315	
S-2D 245 Stain ZCG черный 3 гр	ЦК316	
S-2D Stain ZCG красно-серый 3 гр	ЦК317	