



Эстетичные решения для вашей практики

Clarity™ Ultra. Керамические самолигирующиеся брекеты от ЗМ

Незаметное лечение. Прекрасный результат.



Создание успеха для вас и ваших пациентов.

Как вы знаете, в настоящее время подходы к ведению ортодонтического лечения меняются. У пациентов появляется больше возможностей. Теперь пациент активно участвует в принятии решения о выборе системы, используемой во время лечения. Вместе с этим появляется много новых и эффективных продуктов для ортодонтии.

В разгар этих изменений ваша цель остается прежней – создавать красивые, здоровые улыбки, которые прослужат вашим пациентам всю жизнь.

Демонстрируйте свой опыт, обеспечивая точный результат.

Самолигирующиеся брекеты Clarity™ Ultra обеспечивают надежный контроль ротаций, эстетическую адаптивность. А концентратор напряжения, разработанный компанией 3М, создан для предсказуемого и легкого дебондинга.




Расширение возможностей вашей результативности.


Вы и ваши пациенты хотите одного и того же: эффективных методов лечения с положительными результатами. Для их достижения вам нужны контроль и предсказуемость брекет-системы. Брекеты Clarity™ Ultra позволяют вам успешно планировать лечение и получать точные результаты.




Легкая смена дуг без лигатур.

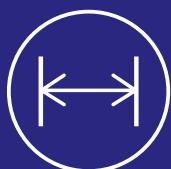

Широкая керамическая дверца обеспечивает контроль ротаций за счет достаточного мезио-дистального размера.

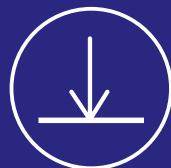

Пассивный или активный при необходимости.

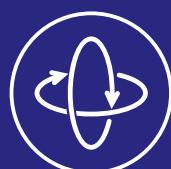

Контроль ротаций без дополнительных приспособлений.



Простой и эффективный процесс фиксации.

Брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free являются прекрасным сочетанием нетканого материала и адгезива низкой вязкости, что позволяет заполнить все пространства и поднутрения между основанием брекета и эмалью зуба, а это значит, что брекеты с преднанесенным адгезивом также позволяют заботиться об эмали пациента на протяжении всего ортодонтического лечения.



Брекеты Clarity™ Ultra доступны с APC Flash-Free для комфорта фиксации, сокращения времени пребывания пациента в кресле, а также легкого удаления адгезива после окончания лечения и снятия брекетов.



Экономит Ваше время

- ✓ Более быстрый и эффективный процесс фиксации, чем у традиционных брекетов.*
- ✓ Исключает этап удаления излишков адгезива во время фиксации.
- ✓ Легкое удаление остатков адгезива после снятия брекетов.



Надежная фиксация

- ✓ Время фиксации сокращается до 40%.*
- ✓ Отсутствие этапа удаления излишков минимизирует риск смещения брекета после его установки.
- ✓ Защищает эмаль зубов пациентов.*

*«Исследование ортодонтических диагнозов и процедур лечения, часть 1: результаты и тенденции», Journal of Clinical Orthodontics, октябрь 2014 после снятия брекетов.



Технологии, на которые вы можете положиться.

Выбирая брекеты Clarity™ Ultra, Вы используете передовые технологии 3М, которые обеспечивают предсказуемость результата лечения. Clarity™ Ultra – это эстетичное решение для ваших пациентов.



Эффективность

- ✓ Цветные идентификационные метки для быстрого выбора брекета.
- ✓ Вертикальные и горизонтальные контрольные разметочные линии, легко смывающиеся водой после фиксации, для быстрой установки брекета на зуб.
- ✓ Брекеты поставляются с открытыми дверцами, что исключает необходимость их открытия перед установкой дуг.
- ✓ Концентратор напряжения, разработанный для удобства дебондинга в конце лечения.



Надежность механизма дверцы

- ✓ Исключает случайное открытие и закрытие.
- ✓ Осуществляет слышимый щелчок при открытии или закрытии.
- ✓ Обеспечивает большое количество циклов открывания и закрывания.



Пассивные самолигирующиеся керамические брекеты Clarity™ Ultra для эстетичного лечения



Замок-трубка Victory Series Superior Fit с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free: оптимизированный дизайн обеспечивает отличное прилегание, удобство использования и эффективность лечения.



Несъемный усталостно-прочный аппарат Forsus для коррекции дистального прикуса, не требующий кооперации со стороны пациента.

Надежный производитель. Множество решений для вашей практики.

Разработанные компанией 3М самолигирующиеся брекеты Clarity™ Ultra в дополнении с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free и корректором II класса Forsus обеспечивают ортодонту эффективную работу, а пациенту – надежный долгосрочный результат.



Простое решение, вдохновляющее на улыбки.

Брекеты Clarity™ Ultra, подстраивающиеся под естественный цвет зубов, представляют собой полностью эстетичное решение.

Прозрачный и устойчивый к загрязнениям брекет не имеет видимых металлических частей, что придает ему привлекательный внешний вид.

Отсутствие эластичных лигатур, которые могут окрашиваться во время лечения, также способствует улучшению эстетики. Гладкая керамическая поверхность и закругленные углы брекетов обеспечивают комфорт во время лечения, который оцените и вы, и ваши пациенты.



**Clarity™ Ultra –
это прекрасная эстетика
для красивых
и здоровых улыбок.**

Самолигирующиеся брекеты Clarity™ Ultra



Пропись МВТ

Верхний зубной ряд			In/Out		Номер по каталогу - .022 in.	
Зуб	Торк	Ангуляция	in.	мм	Левый	Правый
Центральный резец	+17°	4°	0.026	0.66	003-301	003-302
Боковой резец	+10°	8°	0.035	0.89	003-303	003-304
Клык, крючок	0°	8°	0.021	0.53	003-307	003-308
Премоляр, крючок	-7°	0°	0.029	0.74	003-310	003-311

Нижний зубной ряд			In/Out		Номер по каталогу - .022 in.	
Зуб	Торк	Ангуляция	in.	мм	Левый	Правый
Верхний резец	-6°	0°	0.045	1.14		003-350
Клык, крючок	0°	3°	0.020	0.51	003-353	003-354
Первый премоляр, крючок	-12°	2°	0.030	0.76	003-357	003-358
Второй премоляр, крючок	-17°	2°	0.034	0.86	003-361	003-362

Для заказа Clarity™ Ultra с преднаесенным адгезивом APC Flash-Free к каждому каталожному номеру нужно добавить в начале «4». Например: 4003-301.

Наборы

	Номер по каталогу - .022 in.
U/L Lt/Rt 5x5 Hk	003-111
U Lt/Rt 5x5 Hk	003-116

Для заказа Clarity™ Ultra с преднаесенным адгезивом APC Flash-Free к каждому каталожному номеру нужно добавить в начале «4». Например: 4003-301.

Инструменты для работы с брекетами Clarity™ Ultra

	Номер по каталогу
Инструмент для снятия самолигирующихся брекетов Clarity™ Ultra	804-175
Инструмент для открытия и закрытия самолигирующихся брекетов Clarity™ Ultra	804-155



Номер по каталогу 804-155



Номер по каталогу 804-175



Clarity™

Эстетичные решения для вашей практики

Потрясающая эстетика с Clarity.

Используя эстетические решения для ортодонтии от 3M, вы можете быть уверены, что ваши пациенты будут довольны процессом лечения.

Наши технологии, используемые при изготовлении продукции, обеспечивают удобство вашей практики и предсказуемый результат.

Вместе мы создаем здоровые красивые улыбки!



3M



108811, г. Москва,
п. Московский, Киевское ш,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250-84-74
www.3MRussia.ru

3M, APC, Clarity, Forsus и Unitek являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».
© 3M 2020. Все права защищены.

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Для медицинских работников.
Для распространения на профессиональных мероприятиях.